



neo

Pour vous et vos patients

L'art du design medical

FIMET

## Nous connaissons l'art du design medical

Notre objectif chez Fimet est de rendre votre travail plus facile. Nous travaillons avec des professionnels dentaires du monde entier et apportons leurs idées et suggestions dans nos designs. Nous sommes un partenaire qui réagit rapidement et avec souplesse à vos besoins.

Nous sommes une société finlandaise accompagnés de partenaires distributeurs mondiaux, nos produits sont vendus dans plus de 50 pays. Notre développement, notre conception et notre fabrication sont basés en Finlande.

Nous n'utilisons que des matériaux de la plus haute qualité pour assurer un design et une expérience à la fine pointe de la technologie. Vous pouvez également donner au système dentaire Fimet une touche personnelle avec une large sélection de couleurs et de motifs à choisir.



Systèmes de traitement dentaire sur mesure pour les dentistes et les spécialistes de la santé bucco-dentaire

**Améliorer votre expérience de soins aux patients avec le sourire**

**Pourquoi les professionnels dentaires choisissent FIMET sur d'autres marques**

- Caractéristiques et fonctions personnalisées selon vos besoins
- Qualité de fabrication finnoise
- Première prise en main facile et abordable
- Offre un maximum de confort aux patients pendant le traitement
- Bonne santé bucco dentaire des patients par des visites réitérées
- Aide les professionnels dentaires à améliorer les résultats cliniques et à améliorer la productivité
- Prend soin de votre image et celle de votre cabinet

# NEO Continental

Le système de traitement dentaire Fimet NEO combine des solutions innovantes avec un design élégant. Les systèmes de traitement sont des unités ergonomiques et de haute qualité qui peuvent être adaptées aux besoins et aux préférences de chaque utilisateur.

## Tout simplement élégant

Le design élégant et stylé de NEO comprend de nombreux petits détails qui ont un impact important sur votre façon de travailler.

## Choix sécurisé

Gardez vos patients en sécurité. Les surfaces lisses et les protections silicone transparentes facilitent le nettoyage et la désinfection.

## Conçu pour fonctionner en continu

Réglez la position de le fauteuil et les plages de vitesse de l'instrument afin que le fauteuil corresponde à votre façon de travailler.

## Compact

Une petite base représente plus d'espace de travail pour le dentiste et l'assistant. Tout est facile à atteindre.



# NEO Traditionnel

Le système de traitement dentaire Fimet NEO peut également être équipé de tuyaux d'instruments suspendus pour les utilisateurs qui préfèrent cette ergonomie de travail.



## Tout simplement élégant

Le design élégant et stylé de NEO comprend de nombreux petits détails qui ont un impact important sur votre façon de travailler.

## Choix sécurisé

Gardez vos patients en sécurité. Les surfaces lisses et les protections silicone transparentes facilitent le nettoyage et la désinfection.

## Conçu pour fonctionner en continu

Réglez la position de le fauteuil et les plages de vitesse de l'instrument afin que le fauteuil corresponde à votre façon de travailler.

## Compact

Une petite base représente plus d'espace de travail pour le dentiste et l'assistant. Tout est facile à atteindre.

# Pour vous et votre patient

La modularité du Fimet NEO facilite le flux de travail du dentiste et de l'assistant. Cela rend également le traitement plus agréable pour le patient. Contrôlez le système avec un contrôle par pédale sans fil, joystick ou depuis le panneau d'utilisateur..



La hauteur peut être réglée entre 45 et 95 cm.



Prise en charge de l'intégration de l'appareil photo et de l'affichage.



Crachoir tournant sur 90° vers l'extérieur.



Petite base qui correspond même aux plus grands espaces.



Contrôle de pied sans fil multifonctionnel facile à utiliser.



Espace pour 5 instruments sur l'unit.



Tête d'aspiration réglable de 3 heures à 9 heures et totalement articulée.



Position réglable du fauteuil et paramétrage des vitesses d'instrument.



Les accoudoirs tournent sur 90° et sont amovibles.





## Caractéristiques de première classe



Seuls des instruments de qualité bien connus sont utilisés dans les systèmes de traitement NEO.



L'unit porte instruments, les plateaux et le bras d'aspiration sont tous équipés de housses d'hygiène amovibles pour assurer une bonne hygiène.




Le bras d'aspiration est équipé de tuyaux d'aspiration (à aspire salive et aspiration chirurgicale) et d'instruments optionnels tels que la seringue, la lumière de polymérisation et la caméra intra-orale.



Le NEO dispose d'un système de rinçage intégré pour tous les instruments utilisant de l'eau.



L'unité d'eau peut inclure un séparateur d'amalgame intégré ou des vannes selectives pour un système d'aspiration humide.

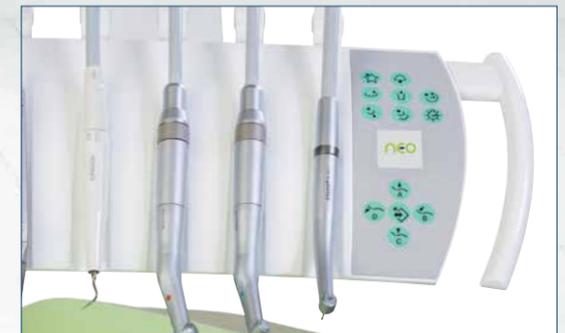

Les instruments NEO peuvent être contrôlés soit par la commande sans fil multifonction du pied, soit par les touches du panneau de l'utilisateur.

## NEO Cart

Le Fimet NEO Cart peut être facilement positionné pour les besoins de diverses opérations, ou même déplacé dans une autre pièce. Il peut être utilisé comme un serveur autonome avec un fauteuil patient NEO, un bras d'aspiration et un crachoir.



Réglage en hauteur motorisé, gamme 77-97 cm.



Il suffit de brancher l'air comprimé et l'alimentation de l'appareil et il est prêt à fonctionner.



## NEO Ceiling

L'unité dentaire NEO Ceiling permet d'économiser de l'espace au sol. Avec une élégance et un sens de l'espace, il s'intègre confortablement dans de petits cabinets.

L'unit peut être tournée vers le côté droit ou gauche du patient, ce qui permet l'utilisation à la fois par un praticien gaucher ou droitier.



Tabouret NEO Pony

## Tabourets

Les tabourets peuvent être livrés dans les mêmes couleurs que le fauteuil NEO.



Tabouret NEO Dental



Tabouret NEO Classic

## Couleurs

Des housses sans couture, faciles à nettoyer et confortables sont disponibles dans de nombreuses couleurs décoratives.

### Griffine

• cuir synthétique, PVC

NG01  
Noir

NG02  
Bleu

NG03  
Violet

NG04  
Pourpre

NG05  
Vert



Les spécifications et les couleurs de cette notice peuvent varier du produit réel et sont sujets à changement sans préavis.

L'art du design medical



Fimet



Notre mission est de concevoir et de produire des systèmes abordables de soins dentaires de haute qualité pour répondre à vos besoins et attentes.





La grande plage de réglage de la hauteur (45-95 cm) du fauteuil NEO permet de travailler à la fois dans des positions assises et debout.

Chaque élément de l'équipement NEO, (groupe hydrique, bras d'aspiration, scialytique), est en mouvement lors des déplacement du fauteuil.

Ainsi, vous ne devez pas ajuster, par exemple, l'éclairage pendant le traitement lorsque vous déplacez le fauteuil vers le haut ou vers le bas.



Le bloc crachoir est tournant sur 90°, permettant de libérer un espace de travail idéal pour l'assistant.



# Options et fonctionnalités

Le système de traitement NEO de Fimet peut être configuré avec une grande variété de propriétés et d'options selon vos souhaits et préférences.

## NEO Unit

Espace pour cinq instruments pouvant inclure les options suivantes:

- Micromoteur(s) électrique(s) avec ou sans balais, avec lumière
- Tuyaux turbine avec lumière
- Détartreur à ultrasons, avec ou sans lumière
- Seringue à 3 ou 6 voies
- Lumière de polymérisation
- Appareil intra-oral

## Bloc hydrique (crachoir)

Peut être équipé de:

- Séparateur d'amalgames intégré
- Vannes pour système d'aspiration humide
- Bouteille de réserve d'eau indépendante
- Bol en porcelaine détachable
- Filtre d'aspiration

## Normes

- Homologué CE selon la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42 / CE
- CEI 60601-1: 2005 testé
- Système de qualité certifié ISO 9001 et ISO 13485

## Dispositif d'aspiration

Comprend:

- Tuyaux d'aspiration aspire salive et aspiration chirurgicale
- Seringue optionnelle
- Lumière de polymérisation facultative
- Appareil intra-oral optionnel

## Fauteuil patient

Comprend:

- Accoudoirs pivotants à 90 degrés pour un accès facile, également amovible
- Quatre réglages réglables individuellement incluant le rappel de dernière position
- Repose-tête réglable à deux articulations
- Position chaise

## Autres fonctionnalités et options:

- Eclairage scialytique Led
- Prise en charge de l'intégration intra-optique de caméra et d'affichage
- Contrôle de pied sans fil et multifonction pour fonctions de chaise et d'instrument
- Support de plateau pour un ou deux plateaux standard

Demandez à votre distributeur NEO local les dernières informations sur le produit et les options.



**FIMET**

Fimet Oy  
Teollisuustie 6  
FI-07230 Askola  
Finlande

Tel: +358 19 521 6600  
Fax: +358 19 521 6666

[fimet@fimet.fi](mailto:fimet@fimet.fi)  
[www.fimet.fi](http://www.fimet.fi)